

neoSkin

Аппарат для ухода
за кожей лица



ReadySkin

Руководство по эксплуатации

Оглавление

Введение	4
Функции прибора	5
Меры безопасности	5
Комплектация	7
Внешний вид и управление аппаратом	8
Подготовка аппарата к работе	9
Проведение процедур	10
Рекомендации по эксплуатации	13
Обслуживание аппарата	13
Возможные неполадки и способы их устранения	15
Технические характеристики	16
Правила хранения и реализации	16
Правила транспортировки	16
Сертификация и гарантия	17
Утилизация продукта	18

*Внимание!
Бытовой прибор
Readyskin neoSkin
не является
медицинским
оборудованием.
Не для применения
в медицинских
целях. Предна-
значен для ухода
за кожей в домаш-
них условиях.*

Введение

Благодарим Вас за покупку ультразвукового аппарата для ухода за кожей лица Readyskin neoSkin!

Аппарат Readyskin neoSkin позволяет осуществлять комплексный уход за кожей на основе современных эффективных методик с использованием ультразвуковых и вибромассажных функций.

Прибор предназначен для ухода за кожей лица. Основные функции — очищение кожи лица, вибромассаж, улучшение проникновения косметических средств при помощи вибромассажных и микротоковых воздействий, лифтинг — эффект, световое воздействие на кожу лица.

Перед началом использования прибора, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению. Уделите особое внимание главе «Меры безопасности».



*Для перехода
к полной интерактивной
версии инструкции
отсканируйте QR-код*

Функции прибора

1. «С» — Clean — Очищение (3 уровня мощности)
2. «N» — Nourishing — Питание и увлажнение (3 уровня мощности)
3. «L» — Lifting — Подтяжка (3 уровня мощности)
4. «P» — Photone — Световое воздействие (LED) (3 уровня мощности)
5. «M» — Massage — Тонизирующий вибромассаж (3 уровня мощности)
6. «S» — Soothing — Успокаивающий вибромассаж (3 уровня мощности)

Меры безопасности

Аппарат Readyskin neoSkin достаточно прост в использовании, однако, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с аппаратом.

Внимание!

- Проводите регулярную проверку состояния рабочей поверхности прибора. При обнаружении острых кромок или глубоких царапин на рабочей поверхности аппликаторов



дальнейшая эксплуатация аппарата запрещается до устранения дефектов при помощи полировки;


- запрещается эксплуатация и хранение аппарата в местах с повышенной влажностью (саунах, ванных комнатах) и высокой температурой, под прямыми солнечными лучами;
- после внесения аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать не менее 2-х часов перед подключением аппарата к сети и началом использования;
- запрещается работать аппликаторами прибора по сухой коже. Поддерживайте поверхность кожи постоянно увлажненной при помощи специальных средств (тоники, сыворотки, лосьонов или гелей);
- во время процедуры не рекомендуется многократная (от 8 раз) обработка одного и того же участка кожи аппаратом;
- использование прибора допускается только лицам в возрасте от 18 лет. Людям с ограниченными физическими и умственными возможностями перед использованием аппарата необходимо внимательно ознакомиться с устройством и возможными рисками;
- не рекомендуется разбирать или самостоятельно ремонтировать устройство. Сервисное обслуживание аппарата должно произ-

водиться только в специализированных центрах;


- полностью зарядите устройство перед первым использованием;
- в случае необходимости ремонта обратитесь в уполномоченный сервисный центр.

Комплектация


Комплектация и внешний вид могут быть изменены изготовителем, с сохранением основных функций и потребительских свойств устройства.

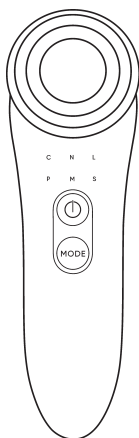

Аппарат
neoSkin x1

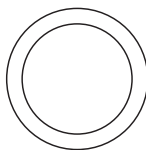

Кольцо для
фиксации

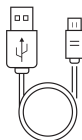

USB Type-C
кабель x1



Руководство
по эксплуатации

Внешний вид и управление аппаратом

«С» — режим ионного очищения. Следует использовать с ватным диском и тоником.


«N» — режим питания и увлажнения. Рекомендуется использовать вместе со средствами по уходу за кожей.

«L» — режим подтяжки кожи. Рекомендуется использовать после процедуры питания и увлажнения.

«S» — режим успокаивающего вибромассажа. Рекомендуется использовать со средствами по уходу за кожей или после режима подтяжки кожи «L».

«M» — режим тонизирующего вибромассажа. Для ежедневного расслабления мышц лица.

«P» — режим светового воздействия. Рекомендуется использовать перед сном с косметикой по уходу за кожей.

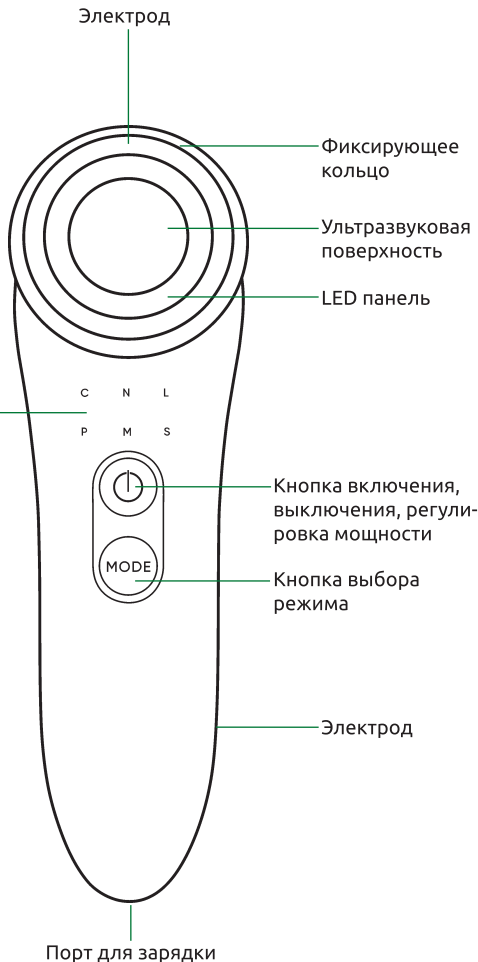

Подготовка аппарата к работе

Подготовка

Проведите визуальный осмотр аппарата на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь, что рабочая поверхность не имеет повреждений и острых сколов.

Зарядка аппарата

Непрерывно горящие светодиоды сигнализируют о том, что устройство полностью заряжено.

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аппарат, подключив кабель к разъему на корпусе и любому источнику питания — USB порту или адаптеру.


Рекомендуемые производителем параметры адаптера питания:

Выходной ток	1 A
Разъем выходной	USB, тип A
Входное напряжение	AC 220 В
Выходное напряжение	DC 5 В

Примечание

Прибор не предназначен для использования во время зарядки.

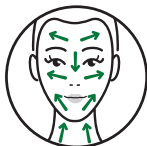

Массажные линии

Используйте эту схему при выполнении всех процедур.

Во всех режимах рекомендуется начинать с минимальной мощности, постепенно повышая ее по собственным ощущениям. При появлении дискомфорта незамедлительно прекратите процедуру.

Проведение процедур

*Переход
на видеоинструкцию*

**Режим «С» — Clean
(Очищение / Дезинкрустация)**

Действие: Вибромассаж + прогрев + ионное очищение. Омыляет жирные кислоты, деликатно удаляя плотные загрязнения и комедоны из пор.

Применение: Очистите лицо от макияжа. Снимите фиксирующее кольцо, закрепите ватный диск или нетканую салфетку, обильно пропитайте ее лосьоном-дезинкрустантом или тоником.

Включите прибор, кнопкой «MODE» выберите режим «С». Медленными круговыми движениями ведите по массажным линиям. При звуковом сигнале смените зону. Салфетка должна оставаться влажной на протяжении всех 3 минут работы. По окончании смойте остатки средства водой и промокните лицо.



ReadySkin

Режим «N» — *Nourishing* (Питание и увлажнение)

Действие: Вибромассаж + прогрев + ионофорез. Ультразвук и гальванический ток повышает эффективность уходовых средств.

Применение: Равномерно нанесите крем, маску или сыворотку на выбранную зону лица. Активируйте режим «N». Плавно перемещайте прибор круговыми движениями. После звукового сигнала переходите к следующей зоне лица, предварительно нанеся на нее косметическое средство.

Режим «L» — *Lifting* (Подтяжка кожи)

Действие: Вибромассаж + прогрев + микромассаж + микротоки. Стимулирует естественные процессы для подтяжки кожи и улучшает контуры лица и тела

Применение: Нанесите средство с подтягивающим (лифтинг) эффектом на рабочую зону. Выберите режим «L». Медленно ведите прибор по массажным линиям, не допуская высыхания кожи.

Режим «P» — *Photon* (Световое воздействие LED)

Действие: Вибромассаж + прогрев + попеременное или сочетанное воздействие красным



и синим светом. Красный свет способствует повышению упругости кожи и помогает уменьшить видимость морщин, а синий — помогает снизить ощущение жирности и улучшить внешний вид кожи, склонной к несовершенствам.

Применение: Нанесите уходовое средство или маску с гиалуроновой кислотой. Включите режим «Р» и проработайте зоны лица по массажным линиям до звукового сигнала.

Режим «М» — Massage (Тонизирующий вибромассаж)

Действие: Вибромассаж + прогрев + красный спектр LED. Способствует расслаблению и поддерживает более подтянутый вид кожи.

Применение: Процедура выполняется по массажным линиям поверх нанесенного тонизирующего средства или гиалуроновой маски.

Режим «S» — Soothing (Расслабляющий/успокаивающий массаж)

Действие: Вибромассаж + прогрев + синий спектр LED. Снимает покраснения и визуально уменьшает видимость пор.

Применение: Рекомендуются использовать со средствами для чувствительной кожи или сразу после режима подтяжки «L». Наносите



средство по зонам и плавно перемещайте аппликатор.

Рекомендации по эксплуатации

Частота процедур: Режимом очищения «С» рекомендуется пользоваться 1 раз в 2–3 дня. Остальные режимы («N», «L», «P», «M», «S») можно использовать ежедневно или через 1–2 дня в зависимости от состояния кожи и личных привычек.

Таймер: Аппарат запрограммирован на автоматическое выключение через 3 минуты непрерывной работы в одном режиме.

Техника движений: Прикоснитесь рабочей поверхностью к коже, плавно и медленно ведите аппарат круговыми движениями или по направлению вверх. Избегайте резких движений и энергичных нажатий.

Обслуживание аппарата

Перед началом и по окончании каждой процедуры необходимо проводить антисептическую обработку металлических аппликаторов прибора при помощи мягкой салфетки, смоченной в антисептическом растворе (70 % раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода). Периодически протирайте корпус

прибора мягкой салфеткой, слегка увлажненной нейтральным моющим средством.

Запрещается:

- Погружать прибор в жидкость.
- Использовать для протирки рабочей поверхности и корпуса агрессивные средства и растворители.
- Применять салфетки с жестким ворсом или абразивным слоем.
- Подвергать аппарат сильному механическому воздействию.
- Внутри аппарата neoSkin нет компонентов или частей, требующих обслуживания.

Если неисправность не удастся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера

*по телефону
8 800 755-56-29*

*или e-mail
garotdel@mail.ru*

Возможные неполадки и способы их устранения

Неисправность	Возможные причины	Решение
Не заряжается	Прибор неправильно подключен к зарядному устройству	Убедитесь, что прибор подключен кабелем к источнику питания
	Отсутствует локальное сетевое питание	Проверьте имеется ли сетевое напряжение. Если индикатор зарядки не загорается, то обратитесь к продавцу
Не включается	Неправильно нажимаете кнопку питания	Зарядите устройство
	Аккумулятор прибора разряжен	
	Низкий заряд батареи	
Нагрев прибора во время использования	Данная особенность не является неисправностью, потому что во время работы прибора осуществляется выработка тепла	



Технические характеристики

Модель	neoSkin
Частота ультразвука	3 МГц
Встр. аккумулятор	3,7 В; 800 мАч
Время зарядки	~2 ч
Потреб. мощность	Максимально ~3 Вт
Резервный ток	Менее 20 мкА
Режимы работы	Очищение, Питание и увлажнение, Подтяжка, Световое воздействие, Массаж, Расслабление
Материал	ABS-пластик, нержавеющая сталь
Вес аппарата	~145 г

Правила хранения и реализации

*Внимание!
Антисептическое
средство
не должно
попадать внутрь
пластикового
корпуса прибора.
Используйте
салфетки с умерен-
ным количеством
жидкости.*

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %. В помещениях, где хранятся изделия не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка



по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах — в контейнерах. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Сертификация и гарантия

*Гарантийный
период на изделие
Readyskin neoSkin
составляет
12 месяцев с даты
получения товара.*

Readyskin neoSkin соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы некачественного ремонта, изменения конструкции или схемы изделия, возникших после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.;
- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия;
- гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.



Правила утилизации



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор.

Изготовитель

Shenzhen Cyberspace Tech Company Limited, Room 301&308,
Building B, Xinlongxin Technology Park, No. 50 Fengtang Avenue,
Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)

ООО «Р-Дистрибуция», Адрес: Россия, 195267, город Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, дом № 86, корпус 1, офис 12-Н

Горячая линия

8 800 775-56-29

звонок по России бесплатный

Дата производства Сентябрь 2026 г.

Гарантийный срок 1 год

Срок службы 2 года



ReadySkin



ReadySkin



readyskin.su

EAC